


ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Спринцовката за автоматично изключване е предназначена за употреба при засмукване и инжектиране на ваксина за медицински цели. Освен това, след инжектиране в тялото буталото може автоматично да се заключи чрез механизма, за да се предотврати повторната употреба на спринцовката.

Целева група или групи пациенти: Цялата популация.

ОСНОВНА СТРУКТУРА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

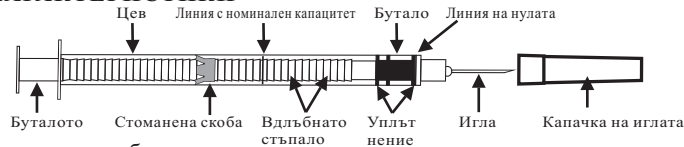


- Цевта е прозрачна, гладка и може да се наблюдава ясно течността.
- В една и съща равнина на буталото може да се види една и съща вдлъбната стъпка, която определя зоната за унищожаване.
- Стоманената скоба, разположена между цевта и буталото, се унищожават след употреба.
- Очаквани клинични ползи: интелигентна и прецизна доставка на лекарства при поискване; намалени системни странични ефекти като зачервяване, болка, подуване; намален риск от наранявания с игла.
- Характеристики на производителността: Прецизно инжектиране на доза, Избягвайте вторична употреба и кръстосано замърсяване

Спецификация: TKADS03: 0,1ml, 0,2ml, 0,25ml, 0,3ml, 0,4ml, 0,5ml, 1ml.Размер на иглата: 23G до 31G

ИЗПОЛЗВАНЕ

- 1) Отлепете стерилната опаковка.
- 2) Отстранете защитната капачка, без да докосвате иглата.
- 3) Не издърпвайте буталото назад, преди да използвате спринцовката.
- 4) Поставете иглата в чистата гумена капачка на флакона с ваксината и изтеглете една доза.
- 5) Изтласкайте въздуха или изпуснете ваксината, като регулирате буталото до посочената доза ваксина.
- 6) Инжектирайте ваксината.
- 7) Издърпайте спринцовката обратно.
- 8) Поставете използваната спринцовка в предпазната кутия (не препълвайте предпазната кутия).

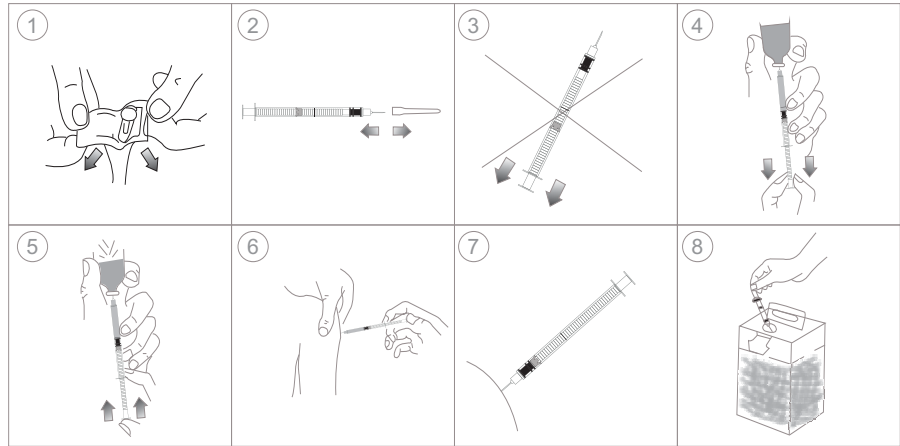

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Иглата се издига нагоре и изхвърля целия въздух в цилиндъра на спринцовката, в случай че въздухът се инжектира в човешкото тяло.
- Необичайна работа, не издърпвайте буталото.Засмуквайки течност, не натискайте обратно.защото това ще доведе до унищожаване на продукта.
- Преди отваряне на опаковката тя трябва да е стерилна и непиrogenна.
- Срокът на валидност е пет години.Не използвайте, ако срокът му на годност е изтекъл.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не използвайте, ако опаковката е отворена или повредена, или защитната капачка е разкъсана, или са открити чужди тела.
- Трябва да се използва от специално обучено лице, а кожата трябва да бъде правилно стерилизирана.
- Продуктите не могат да се използват повторно, повторната употреба може да доведе до кръстосана инфекция, дори до сериозни заболявания, като хепатит, ХИВ и други инфекциозни заболявания.

СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът трябва да се съхранява в състояние, че относителната влажност е по-малка от 80%, температурата варира от -10 до 40 °C.

СИМВОЛИ

Уникален идентификатор на устройството	Код на партидата	Каталоген номер	Caution	Стерилизирано с етиленов оксид
Дата на производство	Производител	Предотвратяване на повторната употреба	Do not re-use	Не използвайте, ако опаковката е повредена
Медицинско изделие	Дата на годност	Да не се рестерилизира	Fragile, handle with care	Температурна граница
Да се пази от слънчева светлина	Поддържайте сух	Не е пиrogenно	This way up	Ограничаване на влагата
Единична стерилна бариерна система	Единична стерилна бариерна система със защитна външна опаковка	BER.: V/0 DATA: 2023-06-30		